



Toll-free:400-611-2007

Order:010-62617225 62979301

Email:zomanbio@126.com

Http://www.zomanbio.com

版本号:2018-06-06

CCK试剂盒

Cell Counting Kit

(货号: ZP328)

产品应用: 细胞增殖测定、细胞毒性测定, 药物筛选、肿瘤药敏试验等与细胞活性和增殖相关的实验。

· 简单 · 安全 · 重现性好 · 灵敏度高

产品介绍-----	P1-P4
使用方法-----	P4-P7
注意事项-----	P5
细胞增殖分析-----	P5-6
细胞毒性分析-----	P7
常见问题与解答-----	P8-P13
实验数据参考-----	P13-P17

实验室使用, 仅用于科研

北京庄盟国际生物基因科技有限公司
Beijing Zoman Biotechnology Co.,Ltd.

■ 产品包装

目录号	产品名称	规格	包装
ZP328-1	Cell Counting Kit(CCK试剂盒)	100T	1ml
ZP328-2	Cell Counting Kit(CCK试剂盒)	500T	1mlx5
ZP328-3	Cell Counting Kit(CCK试剂盒)	1000T	1mlx10
ZP328-4	Cell Counting Kit(CCK试剂盒)	5000T	5mlx10
ZP328-5	Cell Counting Kit(CCK试剂盒)	10000T	5mlx20

■ 产品简介

Cell Counting Kit(CCK试剂盒)细胞增殖与活性检测试剂盒是一种基于WST-8 (2-(2-甲氧基-4硝基苯)-3-(4-硝基苯)-5-(2,4-二噻基苯)-2H-四唑单钠盐)的试剂盒, WST-8是一种类似于MTT的化合物,在电子耦合试剂存在的情况下,可以被线粒体内的一些脱氢酶还原生成橙黄色的水溶性的甲臞染料(formazan,参考图1)。WST-8被细胞内脱氢酶生物还原后生成的甲臞能够直接溶解在培养基中。细胞增殖越多越快,则颜色越深;细胞毒性越大,则颜色越浅。对于同样的细胞,生成的甲臞物的数量与活细胞的数量成正比,颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。因此可利用这一特性直接进行细胞增殖和毒性分析。

本试剂盒提供了一种灵敏度高,操作简便,使用安全的细胞增殖与活性检测方法。与传统的MTT实验相比优势明显:

★ MTT实验生成的甲臞不是水溶性的,需要使用DMSO等有机溶剂溶解;而本方法产生的甲臞是水溶性的,不仅省去了溶解的步骤,更减少了因该操作步骤而带来的误差。

★ 与MTT方法相比,本方法线性范围更宽,灵敏度更高。


★ 本方法对细胞无毒性,可以多次测定,选取最佳测定时间。

★ 本方法所用试剂在培养基中比MTT更加稳定,实验效果重复性好。

★ MTT具有毒性,同时其生成的甲臞需要有机溶剂溶解,会对操作人员身体造成危害。本试剂无毒,使用中无需有机溶剂,操作更加安全。

★ 使用无需配制,即开即用。

本试剂盒可以用于生物活性因子的活性检测,抗肿瘤药物的筛选,细胞增殖的测定,细胞毒性检测以及药敏等与细胞活性和增殖相关的实验。本试剂盒使用方便,试剂盒包含一管已经配制好的含有WST-8的CCK溶液,即开即用,无需其他准备步骤。检测过程也无需采用额外的步骤去溶解甲臞,可直接使用96孔板或者384孔板在酶标仪上检测,适合大规模,高通量的样品检测。

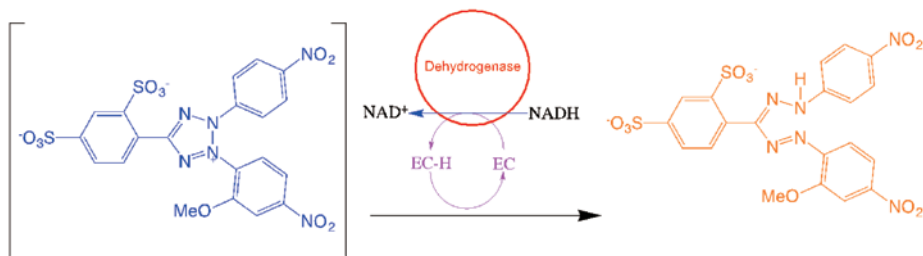

参考图1

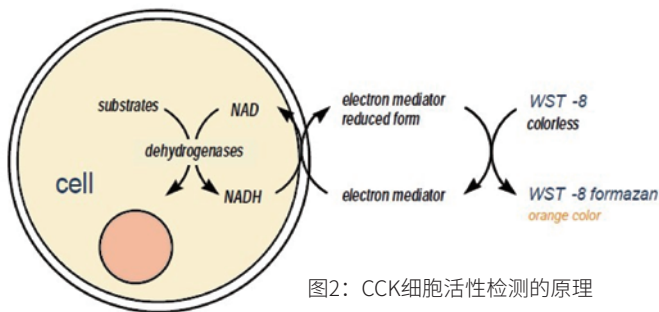



图2: CCK细胞活性检测的原理

保存条件:

CCK溶液在避光, 0-5°C的条件下可以保存6个月以上, 如长期保存, 可在-20°C下保存2年以上。若经常使用, 为防止背景值增加干扰实验结果, 请在0-5°C存放, 勿反复冻融。



★简单! 安全! 重现性好!

无需有机溶剂和放射性同位素, 步骤少, 无损失, 结果准确


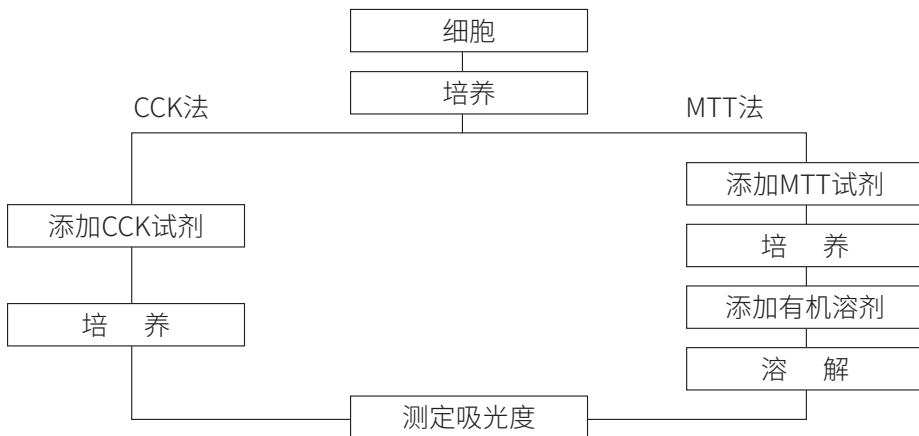


	CCK法	MTT法
1	还原后的Formazan是水溶性的 (不需要溶解)	还原后的Formazan是非水溶性的 (需要加有机溶剂溶解)
2	重现性好	重复性差
3	操作简单	操作繁琐
4	测定波长: 450~490nm	测定波长: 550~600nm
5	为1瓶溶液, 无需预制, 即开即用	由于需要加有机溶剂溶解, 工作量大

★灵敏度高!
灵敏度高于MTT,XTT和MTS!

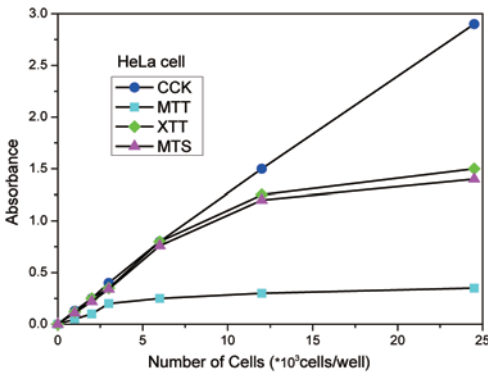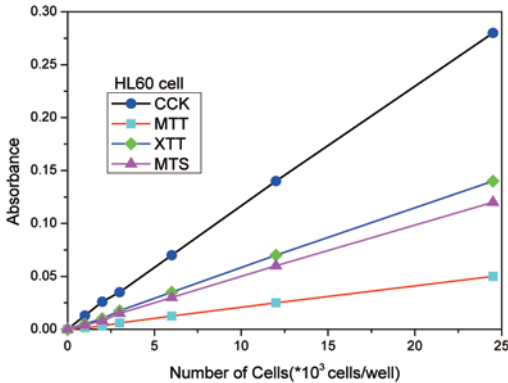

Medium: MEM,10% FCS(HeLa); RPMI1640,10% FCS (HL60)
 Incubation: 37°C,5%CO₂,2h(HeLa); 37°C,5%CO₂,2h(HL60)
 Detection: CCK@450nm; XTT@450nm; MTS@ 490nm; MTT@ 570nm

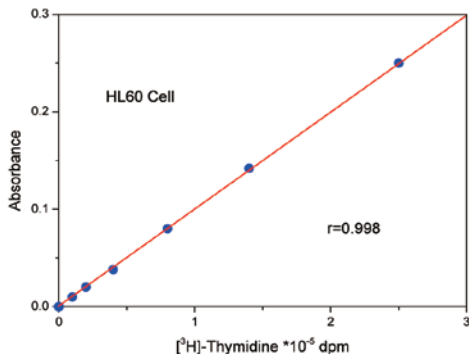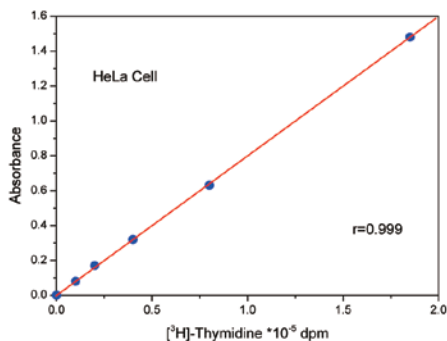

CCK法与 $[^3\text{H}]\text{-Thymidine}$ 掺入法之间的相关性

Medium: HeLa.....MEM,10%FCS

HL60.....RPMI1640,10%FCS

$[^3\text{H}]\text{-Thymidine}$37KBq/well

Reagent: CCK.....10 μl /well

$[^3\text{H}]\text{-Thymidine}$ assay....4hours

Incubation: CCK.....3hours

■ CCK试剂使用方法:

使用方法 (以96孔板为例, 其他规格培养板按实际情况安排):

1. 在96孔板中配置100 μl 的细胞悬液 (通常细胞增殖实验每孔加入100 μl 2000个细胞, 细胞毒性实验每孔加入100 μl 5000个细胞。具体每孔所用的细胞的数目, 需根据细胞的大小, 细胞增殖速度的快慢等因素决定)。按照实验需要, 在37 $^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 的条件下预培养24小时。

2. 向培养板加入1-10 μl 不同浓度的待测药物刺激。

3. 将培养板在培养箱孵育一段适当的时间 (后面附表中有具体细胞的建议时间, 例如: 6、12、24或48小时)。

4. 每孔加入10 μl CCK溶液 (注意不要在孔中生成气泡, 会影响OD值的读数)。如果起始的培养体积为200 μl , 则需加入20 μl CCK溶液, 其他情况以此类推。可以用加了相应量细胞培养液和CCK溶液但没有加入细胞的孔作空白对照。如果担心所使用的药物会干扰检测, 需设置加了相应量细胞培养液、药物和CCK溶液但没有加入细胞的孔作为空白对照。

5. 在细胞培养箱内继续孵育1-4小时, 对于大多数情况孵育1小时就可以了。时间的长短根据细胞的类型和细胞的密度等实验情况而定, 初次实验时可以在0.5、1、2和4小时时候分别用酶标仪检测, 然后选取吸光度范围比较适宜的一个时间点用于后续实验。

6. 用酶标仪测定在450nm处的吸光度，如无450nm滤光片，可以使用420-480nm的滤光片。可以使用大于600nm的波长，例如650nm，作为参考波长进行双波长测定。

7. 如果暂时不测定OD值，打算以后测定的话，可以向每孔中加入10 μ l 0.1M的HCL溶液或者1% w/v SDS溶液，并遮盖培养板避光保存在室温条件下。在24小时内吸光度不会发生变化。

8. 注意：如果待测物质有氧化性或还原性的话，可在加CCK之前更换新鲜培养基（除去培养基，并用培养基洗涤细胞两次，然后加入新的培养基），去掉药物影响。当然药物影响比较小的情况下，可以不更换培养基，直接扣除培养基中加入药物后的空白吸收即可。

数据分析：详见细胞增殖分析与细胞毒性分析具体操作流程。

注意事项：

1. 由于使用96孔板进行检测，如果细胞培养时间较长，一定要注意蒸发的的问题。一方面，由于96孔板周围一圈最容易蒸发，可以采取弃用周围一圈的办法，改加PBS，水或培养液；另一方面，可以把96孔板置于靠近培养箱内水源的地方，以缓解蒸发。

2. CCK检测细胞活性的原理是通过检测活细胞脱氢酶催化的反应。任何待测体系中存在还原剂，例如一些抗氧化剂会干扰检测，需设法去除。

3. 建议先做几个孔摸索接种细胞的数量和加入CCK试剂后的培养时间。

4. 建议采用多通道移液器，可以减少平行孔间的差异。加入CCK试剂时，建议斜贴着培养板壁加，不要插到培养基液面下加样，溶液产生气泡，会干扰OD值读数。

5. 当使用标准96孔板时，贴壁细胞的最小接种量至少为1000个/孔（100 μ l培养基）。检测白细胞时的灵敏度相对较低，因此推荐接种量不低于2500个/孔（100 μ l培养基），且培养时间长一些。如果要使用24孔板或6孔板实验，请先计算每孔相应的接种量，并按照每孔培养基总体积的10%加入CCK溶液。

6. 加入CCK溶液时，如果细胞培养时间较长，培养基颜色已变化或PH值变化，建议换用新鲜的培养基。

7. 如果没有450nm的滤光片，可以使用吸光度在430-490nm之间的滤光片，但是450nm滤光片的检测灵敏度最高。

8. 酚红和血清对本试剂盒的测定无明显影响。培养基中酚红的吸光度可以在计算时，通过扣除空白孔中本底的吸光度而消去，因此不会对检测造成影响。

9. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

细胞增殖分析

(1) 设备

培养箱 酶标仪 单枪或排枪

(2) 方法

制备细胞悬液



接种到96孔培养板



37°C培养箱中培养(注1)



加入10 μ l的CCK(注2)



培养1-4小时(注3、注4)



测定450nm吸光度(注5)

(3) 注意事项

注1: 细胞接种后贴壁大约需要培养2-4小时, 不需要贴壁的话, 可以省去这个步骤。


注2: 由于每孔加入的CCK量比较少, 有可能会因试剂沾在孔壁上而带来误差, 建议在加完试剂后轻轻敲击培养板以帮助混匀。

注3: 细胞的种类不一样, 形成的Formazan的量也不一样。如果显色不够的话, 可以继续培养, 以确认最佳条件。特别是血液细胞形成的Formazan很少, 需要较长的显色时间(5-6小时)。

注4: 如果颜色不均匀的话, 可以轻轻敲击培养板以帮助混匀。

注5: 建议采用双波长进行测定, 检测波长450-490nm, 参比波长600-650nm。

细胞数目和吸光度的相关曲线

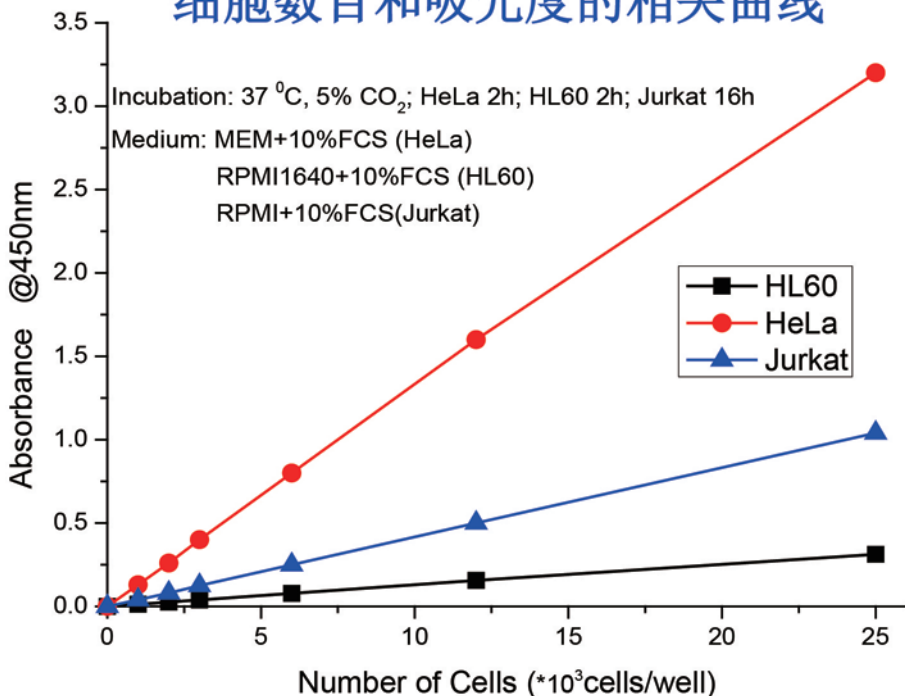

细胞毒性分析

(1) 设备

培养箱 酶标仪 单枪或排枪

(2) 方法

制备细胞悬液

↓

接种到96孔培养板

↓

37°C培养箱中培养(注1)

↓

加入不同浓度的毒性物质

↓

加入10μl的CCK(注2)

↓

培养1-4小时(注3、注4)

↓

测定450nm吸光度(注5)

(3) 注意事项

注1: 细胞接种后贴壁大约需要培养2-4小时, 不需要贴壁的话, 可以省去这个步骤。


注2: 加入毒性物质的培养时间, 要看毒性物质的性质和细胞的敏感性, 一般要根据细胞周期来决定, 起码要一代以上的周期。

注3: 由于每孔加入的CCK量比较少, 有可能会因试剂沾在孔壁上而带来误差, 建议在加完试剂后轻轻敲击培养板以帮助混匀。

注4: 细胞的种类不一样, 形成的Formazan的量也不一样。如果显色不够的话, 可以继续培养, 以确认最佳条件。特别是血液细胞形成的Formazan很少, 需要较长的显色时间 (5-6小时)。

注5: 如果颜色不均匀的话, 可以轻轻敲击培养板以混匀。

注6: 建议采用双波长进行测定, 检测波长450-490nm, 参比波长600-650nm。

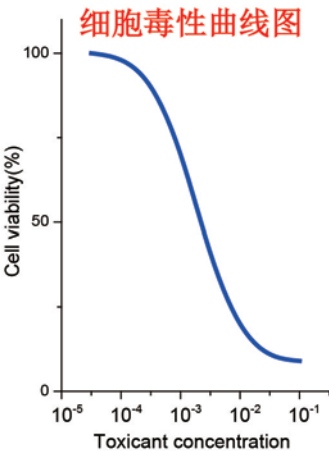

细胞毒性曲线图

IC₅₀的计算方法:

按照以下公式计算细胞存活率, 然后绘制成图表, 细胞存活率为50%的值即为IC₅₀。

细胞存活率 (%) = $[(As-Ab)/(Ac-Ab)] \times 100\%$

As: 实验孔

(含有细胞的培养基、CCK、毒性物质)

Ac: 对照孔

(含有细胞的培养基、CCK、没有毒性物质)

Ab: 空白孔

(不含细胞和毒性物质的培养基、CCK)

■ Q & A (常见问题与解答) :

Q1. 设定参比波长的目的是什么? 必须要设定吗?

A1. 不一定要设定。CCK试剂在参比波长处没有吸光度。设定参比波长的目的是为了去除由于样品浑浊所带来的吸收。

Q2. 如何设定空白对照?

A2. 可以在不含细胞, 含有药物的培养基中加CCK, 测定450nm的吸光度作为空白对照。

Q3. 在做加药实验时, 药物对测定是否有影响? 如何解决?

A3. 有时会有影响。如果药物具有氧化还原性, 会和CCK发生反应, 吸光度发生变化。解决办法: 首先要确认药物是否有吸收, 在含有药物的培养基中加入CCK, 测定450nm的吸光度, 如果它的吸光度与不含药物的培养基(加CCK)的吸光度相比有明显变化, 则证明药物有影响, 可在加CCK之前更换培养基, 去掉药物的影响。

Q4. 不更换培养基加CCK试剂, 有没有问题?

A4. 一般没有问题。但是如果培养基里有氧化还原性物质的话, 有可能会产生误差, 必须更换其他培养基。我们发现以下培养基会影响测定:

培养基	空白吸收
IMDM	1.0
McCoy/s	0.3

Q5. 哪些物质会影响CCK的测定?

A5. 当有还原性物质存在时会影响CCK的测定, 增加OD值; 在有氧化性物质存在时会抑制测定反应的发生, 减小OD值; 在有酚红存在的情况下, 会增加空白吸收, 但不影响测定, 扣除空白吸收即可; 血清不影响测定。

Q6. 说明书上仅写了96孔板的测定方法, 如果使用24孔板或12孔板, 应该加多少量CCK试剂?

A6. 一般情况下建议加入CCK试剂的量是培养基体积的1/10。

Q7. 如何减少由于CCK试剂在枪头或者孔壁上的残留所带来的误差?

A7. 可以在加样前用培养基稀释CCK试剂并混匀后加样。

Q8. 每次测定的OD值不一样, 是什么原因? 如何解决?

A8. 可能会有以下几个原因:

- 1、 当在培养箱中培养时，培养板最外一圈的孔最容易干燥挥发，导致培养基的体积不一样，从而增加误差。一般情况下，最外一圈的孔只加培养基，不作为测定孔用。
- 2、 有可能会因为CCK沾在壁上而产生误差，建议在加入CCK后，轻轻敲击培养板以帮助混匀。
- 3、 每孔的细胞数量过多或过少。请预先在1000-100000个/孔范围内摸索条件。

Q9.在CCK显色过程中，如何终止反应？

A9.有以下几种方法（96孔板）：

- 1、 每孔加10 μ l 0.1M HCl溶液。
- 2、 在显色反应后，将培养板放入4 $^{\circ}$ C冰箱内。
- 3、 每孔加10 μ l 1%(w/v)的SDS（十二烷基磺酸钠）溶液。

注意：选择其中任一种方法即可，反应停止后，应在24小时内测定。

Q10.在实验中吸光度值太高，如果不能减少细胞数量，如何解决？

A10.可以缩短加入CCK后的培养时间。例如：可以把加入CCK试剂后的培养时间由2小时缩短为1小时。

Q11.必须预培养细胞吗？

A11.不一定。如果要想保持细胞的最好状态，建议预培养细胞。如果不做细胞的预培养，细胞内的脱氢酶可能会不稳定。也有研究人员不做细胞预培养，但在做标准曲线和检测时需要统一检测条件。

Q12.如果加入的药物中有金属，是否会有影响？

A12.金属对CCK显色有影响。终浓度为1mM的氯化亚铅、氯化铁、硫酸铜会抑制5%、15%、90%的显色反应，使灵敏度降低。如果终浓度是10mM的话，将会100%抑制。

Q13.CCK的保质期有多久？

A13.CCK在避光0-5 $^{\circ}$ C的条件下可以存放半年，在-20 $^{\circ}$ C下避光可以保存2年。如果需要长期保存，我们推荐在-20 $^{\circ}$ C储藏。正常的CCK颜色为粉红色，如有明显颜色变化，则CCK的质量有可能发生变化。CCK若反复冻融有可能会增加空白吸收，从而影响检测结果，若经常使用可将试剂存放在4 $^{\circ}$ C冰箱内保存。

Q14.预培养后，更换培养基需要细胞计数吗？

A14.一般情况下用胰蛋白酶处理对数增长期的细胞，用血球计数板计数，制备成一定浓度的细胞悬液即可。如果想要精确计数细胞，可以预培养后去培养基用血球计数盘进行计数。

Q15.CCK是否对细胞进行染色?

A15.CCK不对细胞进行染色。培养基中的CCK并不进入细胞内染色细胞,而是在电子载体的作用下被细胞中的脱氢酶还原为高度水溶性的黄色甲臞染料,是一个显色反应。显色反应后,更换新的培养基,可以继续培养细胞。

Q16.CCK对于不同的细胞,灵敏度是否一样?

A16.不同细胞的脱氢酶活性不一样,显色程度不一样,因此灵敏度也不一样。

Q17.悬浮细胞和贴壁细胞在接种数量上有何区别?

A17.大部分悬浮细胞相比贴壁细胞比较难显色,OD值偏低,一般需要增加细胞接种数量或延长加入CCK后的培养时间。贴壁细胞显色比较容易,若细胞数量过大,有时吸光度会超过酶标仪的读数。

Q18.应该每次做标准曲线吗?

A18.建议每次做。虽然细胞是一样的,但是细胞的状态不一定一样。对于状态不一样的细胞,建议每次做标准曲线。如果试剂的批号不一样,灵敏度可能会有轻微的差异,对于不同的批号建议分别做标准曲线。

Q19.有时在药物作用下,细胞已经死亡,但是脱氢酶的活性还在,是否能计算细胞数量?

A19.不能。由于CCK是通过和细胞内的脱氢酶进行反应间接反映活细胞数量,如果细胞已经死亡,但脱氢酶的活性还在,则实际测定的活细胞数量将会比真实值高,不能真实反应活细胞数量,建议采用别的方法测定。

Q20.CCK是什么颜色?

A20.应该是粉红色。若颜色不一样,有可能会影响测定。

Q21.导入基因后,是否可以用CCK来检测活细胞?

A21.可以。

Q22.在pH5的培养基中培养细胞,是否可以用CCK试剂检测?

A22.从理论上来说是可以的,但是需要做标准曲线进一步确定。

Q23.OD值在什么范围比较合适?

A23.一般情况下OD值在0.1-2.0范围内都可以,在1.0附近较好。

Q24.细菌是否会和CCK试剂发生反应？（如果想要检测细菌）

A24.CCK试剂几乎不会和细菌发生显色反应。细菌防御系统非常强，不会发生还原反应。

Q25.CCK试剂用于测定活细胞的数量，对于增殖期的细胞和静止期的细胞，有何影响？

A25.一般情况下CCK试剂用于检测对数生长期的细胞。如果静止期细胞的脱氢酶活性和增殖期的细胞的脱氢酶活性有很大的不同的话，则两者会有很大的差别。

Q26.如果OD值太低，可以采取什么办法？

A26.可以采取2个办法：

- ① 适当增加细胞数量。
- ② 延长加入CCK试剂后的反应时间。

Q27.在做药物毒性实验时，加入CCK试剂培养一段时间后，检测时颜色没有变化，样品OD值和空白OD值一样，是何原因？

A27.可能因素有2个：药物的浓度太高，细胞全部被杀死；如果药物有氧化性，则会抑制CCK试剂的显色反应，可以采取先更换培养基清洗掉药物，然后再加CCK试剂进行检测的方法。

Q28.如何避免细胞聚团现象？

A28.

- ① 可以消化时间长一些。
- ② 细胞培养好后，用手摇匀一下。如果有设备的话最好用设备摇匀。
- ③ 可以用枪头反复吹打，但要避免产生气泡。

Q29.做悬浮细胞的实验时，检测几天比较合适？

A29.由于不更换培养基，长时间的培养，培养基中的氧气和营养会流失，有可能会影响细胞的状态。一般情况下建议培养4-5天左右，但要确定细胞数量是否已经达到饱和？如果需要长时间培养，因为容易蒸发，建议培养板的边缘孔不加细胞。

Q30.如何制作标准曲线？

A30.先取已知细胞数量的细胞悬液加入到培养板中，然后用培养基依次等比例稀释成一个系列浓度的细胞悬液，细胞培养一段时间后加CCK试剂，继续培养一段时间，等颜色发生明显变化后，用酶标仪进行测定，以细胞数量为X轴，OD值为Y轴，就可以做成一条标准曲线。

Q31.细胞数量太多会有什么结果?

A31.贴壁细胞如果接种太多,细胞在培养过程中容易长满而产生互相挤压的现象,导致细胞状态不好或者死亡。另外细胞接种太多容易产生OD值过高(甚至于超过仪器的检测范围)的情况。

Q32.BrdU法和CCK法有何区别?

A32.CCK法是通过检测对数生长期的细胞内的脱氢酶来反映细胞的活性,而BrdU法是检测细胞的DNA合成。CCK法只需要加入试剂,通过比色法就可以检测,而BrdU法不仅要加入试剂,而且要固定细胞,通过抗原抗体反应之后用发光法来检测。两者的原理是完全不同的。如果只是检测细胞增殖的话,那么CCK的方法是比较简单的。

Q33.在做药物毒性实验时,药物对细胞有抑制作用,但检测结果却是OD值升高,为什么?

A33.很可能药物和CCK试剂发生了反应,可以做一个只加药物的空白对照,如果OD值确实比正常的空白对照OD值高很多,则说明药物和CCK试剂发生了反应。可以通过更换培养基清洗掉药物的办法解决。

Q34.加入CCK试剂后,为什么在不同时间检测的值不一样(例如在3小时和在3.5小时)?

A34.由于CCK试剂和细胞内的脱氢酶反应是一个循环反应,随着时间的增加,OD值也会不断增加,颜色会不断加深,但细胞数量却没有太大变化。一般情况下建议在确定最佳的实验条件(合适的时间、合适的OD值)后,把加入CCK试剂后的培养时间固定下来,以后在同样的培养时间点进行检测。

Q35.组内数据差异比较大或组间数据杂乱,没有规律,是何原因?

A35.原因有可能是CCK试剂在移液枪的枪头上或培养板的孔壁上残留,加入时最好快速加入以避免残留,还可以用培养基稀释CCK试剂的办法来降低误差:用培养基稀释CCK试剂1倍,混匀后每孔加20 μ l使用。

Q36.用CCK试剂做细胞毒性检测时:

- ① 贴壁细胞预培养多长时间合适?
- ② 预培养过程中细胞分裂,如何计算细胞数量?
- ③ 如果预培养时间太长,会有什么结果?

A36.

- ① 一般情况下建议贴壁细胞预培养的时间为24h。
- ② 如果只计算药物的LD50值的话,可不必考虑预培养过程中的细胞分裂问题,但要做一个加细胞的对照(该值为最大OD值)。

③ 如果预培养时间太长，有可能细胞会增长过多，达到饱和状态，OD值将会很高，甚至会超过仪器的检测范围。

Q37.在实验中加入刺激细胞增长的因子，但是细胞数量却没有增加（或者吸光值没有上升），为什么？

A37.首先用显微镜观察一下，确定细胞数量是否增加？然后才考虑其他的因素（如果加入的刺激因子和CCK发生反应的话，吸光值不变这种可能性是非常低的）。如果显微镜下观察细胞数量确实增加了，则请检查加入的药物是否具有氧化性？有可能抑制了CCK试剂的反应。方法是：在有细胞的培养基中做1个加药物和不加药物的对比，然后分别加入CCK试剂进行检测，如果不加药物的OD值比加药物的OD值高，则说明药物确实具有氧化性，产生了干扰。

■ CCK试剂盒试剂参考实验数据

(此数据仅供参考，建议预先摸索最佳实验条件)

编号	细胞种类	贴壁 / 悬浮	接种细胞数量	培养板	培养基名称	培养基体积	CCK试剂量	建议加入CCK试剂后培养时间
1	A549 (人肺癌)	贴壁	8000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2-3hr.
2	AGS	贴壁	10000/孔	96	F12	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
3	ASTC-a-1	贴壁	50000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3.5hr.
4	B16 (黑色素瘤)	贴壁	4000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
5	Balb/c 3T3	贴壁	10000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
6	Bcap-37 (人乳腺癌)	贴壁	5000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
7	Bel-7402 (人肝癌)	贴壁	5000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
8	CTLL-2	悬浮	16000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
9	EaHY926	贴壁	20000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.

编号	细胞种类	贴壁 / 悬浮	接种 细胞数量	培养 板	培养基名称	培养基体积	CCK 试剂量	建议加入 CCK试剂 后培养时间
10	ECV340 (人脐静脉血 管内皮细胞)	贴壁	20000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
11	HaCaT	贴壁	10000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
12	HAEC	贴壁	10000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
13	HEK-293	贴壁	5000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
14	HepG2 (人肝细胞癌)	贴壁	2000/孔	96	DMEM, 10%FCS	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
15	Hela (人宫颈癌)	贴壁	2000- 25000/孔	96	MEM, 10%FCS,	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
16	Ho-8910 (人卵巢癌)	贴壁	80000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
17	HL60(人原髓 细胞白血病)	悬浮	30000- 45000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
18	HLF	贴壁	10000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	1hr.
19	HS 766T (人胰腺癌 细胞)	贴壁	100000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
20	Huh7	贴壁	100000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
21	HUVEC	贴壁	5000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
22	Hepatocytes (肝细胞)	贴壁	30000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2-3hr.
23	HSC	悬浮	10000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
24	K562	悬浮	40000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	6hr.
25	L1210(小鼠 淋巴白血病)	悬浮	200000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3hr.

编号	细胞种类	贴壁/ 悬浮	接种 细胞数量	培 养 板	培养基名称	培养基体积	CCK 试剂量	建议加入 CCK试剂 后培养时间
26	L929(小鼠成纤维细胞株)	贴壁	1000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
27	MCF-7 (人乳腺癌)	贴壁	10000/孔	96	RPMI1640+ 10%小牛血清	100μl/孔	10μl/孔	2-3hr.
28	MN9D	贴壁	5000/孔	96	DMEM/ F12(1:1)	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
29	NIH3T3	贴壁	10000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	1-2hr.
30	NRK (大鼠肾细胞)	贴壁	5000/孔	96	DMEM+10% 小牛血清 L-glutamine	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
31	P815	悬浮	10000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
32	PC12	贴壁	10000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3-4hr.
33	(人胆管癌 细胞系) QBC939	贴壁	5000/孔	96	RPMI1640+ 10%TBS	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
34	Raji (人Burkitt's 淋巴瘤)	悬浮	100000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	5hr.
35	RAW264.7 (小鼠巨噬 细胞)	贴壁	20000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
36	SD大鼠脾淋 巴细胞	悬浮	3×10 ⁵ - 4×10 ⁵ /孔	96	RPMI1640+ 10%BSA	200μl/孔	10μl/孔	4hr.
37	SGC-996	贴壁	150000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
38	SH-SY5Y	悬浮	12000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
39	SK	贴壁	80000/孔	96	DMEM	500μl/孔	50μl/孔	3hr.
40	SMC	贴壁	20000/孔	96	DMEM	200μl/孔	10μl/孔	4hr.

编号	细胞种类	贴壁/ 悬浮	接种 细胞数量	培养 板	培养基名称	培养基体积	CCK 试剂量	建议加入 CCK试剂 后培养时间
41	SMMC-7721 (人肝癌)	贴壁	1000/孔	96	DMEM, 10%FCS	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
42	SPC-A1 (肺腺癌)	贴壁	3000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
43	SW480	贴壁	1000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
44	T-24(人膀胱 变异细胞癌)	贴壁	80000/孔	96	DMEM	180μl/孔	10μl/孔	3hr.
45	Tca8113	贴壁	10000000/ 孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
46	T淋巴细胞	悬浮	1×104- 1×106/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
47	U937	悬浮	200000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
48	Vero E6	贴壁	30000/孔	96	RPMI1640 (10%FBS)	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
49	Wish 细胞 (人羊膜细胞)	贴壁	30000/孔	96	5%BCS MEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
50	7901	贴壁	15000- 20000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
51	成纤维细胞	贴壁	1500/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
52	大鼠系膜 细胞	贴壁	10000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
53	骨髓间充质 干细胞	贴壁	4000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
54	结肠癌 Caco-2细胞	贴壁	10000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
55	乳鼠心肌 细胞	贴壁	10000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	0.5-3hr.

编号	细胞种类	贴壁 / 悬浮	接种细胞数量	培养板	培养基名称	培养基体积	CCK试剂量	建议加入CCK试剂后培养时间
56	人成骨细胞	贴壁	5000/孔	96	DMEM-LG成骨细胞诱导培养液	100μl/孔	10μl/孔	3hr.
57	人外周血淋巴细胞	悬浮	50000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
58	人支气管上皮细胞	贴壁	2000/孔	96	LHC-8无血清培养基	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
59	神经母细胞瘤	贴壁	10000/孔	96	MEM	100μl/孔	10μl/孔	2hr.
60	肾小球系膜细胞	贴壁	1000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	1hr.
61	树突状细胞	悬浮	1000000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4.5hr.
62	兔软骨细胞	贴壁	1000/孔	96	DMEM	100μl/孔	10μl/孔	3-4hr.
63	小鼠脾脏T淋巴细胞	悬浮	2000000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4hr.
64	原代大鼠肝脏细胞	贴壁	30000/孔	96	DMEM/F12(1:1)	100μl/孔	10μl/孔	3-4hr.
65	原代胃癌细胞	贴壁	10000/孔	96	RPMI1640	100μl/孔	10μl/孔	4hr.